



Тренажер

OSD-002

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	5
4. Умови використання	6
5. Збирання виробу.....	6
6. Використання пристрою.....	6
7. Вправи	7
8. Технічне обслуговування та догляд.....	7
9. Належна утилізація продукту	8
10. Відомості про сертифікацію.....	9
11. Умови гарантії	10

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте реабілітаційний тренажер, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте реабілітаційний тренажер у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Реабілітаційний тренажер для ніг та рук «OSD-002» (далі за паспортом – реабілітаційний тренажер / тренажер / пристрій / виріб) – призначений для використання людям з проблемами верхніх або нижніх кінцівок. Перед використанням пристрою необхідно проконсультуватися у лікаря.

Реабілітаційний тренажер для ніг та рук «OSD-002» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування тренажера за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. Перед початком використання або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини пристрою закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.



Реабілітаційний тренажер не можна використовувати стоячи на ньому! Це може призвести до перекидання та травмування користувача. Правильним є використання у положенні сидячи / лежачи!

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЬТЕ** загальний технічний стан пристрою. Не використовуйте тренажер у разі виявлення пошкоджень.
3. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд тренажера.

4. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадання рідин на електричні частини тренажера.
5. **НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ** акумуляторну батарею у вологих приміщеннях.
6. Під час експлуатації та зберігання **НЕ ПІДДАВАТИ** впливу підвищених температур і прямих сонячних променів.
7. **НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТА НЕ ЗБЕРІГАТИ** в умовах підвищеної запиленості та вологості, а також тримати на відстані від джерел відкритого вогню.
8. **ЗБЕРІГАТИ** виріб у горизонтальному положенні.
9. Після кожного використання **ВІДКЛЮЧАТИ** живлення на тренажері за допомогою вимикача та виймати вилку з розетки.
10. **ВИКЛЮЧИТИ** потрапляння води та інших агресивних рідин усередину, щоб уникнути виходу з ладу та пошкодження виробу.
11. У разі виявлення будь-яких неполадок **ПРИПИНИТИ** використання виробу.
12. При використанні виробу дітьми, особами з фізичними та психічними порушеннями чи інвалідами, або при знаходженні зазначених осіб поблизу працюючого виробу **ПОТРІБЕН** нагляд з боку інших осіб.
13. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб при виявленні таких неполадок: пошкоджений шнур живлення або виделку, порушення роботи внаслідок падіння або пошкодження. У зазначених випадках необхідно надіслати виріб до сервісного центру для технічного огляду та обслуговування.
14. **НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ** аерозолі або кисень у місці встановлення цього виробу, забороняється використовувати вологі вироби.
15. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ** виріб, встановлений на похилій поверхні, а також при різній висоті ніжок.
16. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ** виріб із незакріпленими деталями.
17. Експлуатація виробу **ДОПУСКАЄТЬСЯ** при температурі від +10°C до +40°C.
18. До експлуатації **НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ** особи, які не ознайомлені з цим паспортом.

Попередження:

Перед використанням велотренажера або будь-якого іншого обладнання для фітнесу або реабілітації завжди заздалегідь консультируйтесь з вашим лікарем. Особливо якщо ви страждаєте наступними захворюваннями:

- онкологічне захворювання;
- пацієнти в післяопераційному періоді;
- захворювання серцево-судинної системи;
- ушкодження кульшових суглобів;
- тромбоз;

- переломи;
- епілепсія.

Консультація з лікарем перед заняттями на тренажері також необхідна вагітним жінкам.

Нагадування:

- Відчуття болю після використання тренажера є нормальним явищем, пов'язаним із прискоренням кровообігу та в свою чергу стимуляцією обміну речовин. Якщо болісні відчуття зберігаються протягом декількох годин, необхідно припинити використання виробу.
- Починати використання велотренажера слід на низькій швидкості. Протягом кількох наступних днів поступово збільшуйте швидкість обертання педалей та час занять. Великий обсяг вправ за один тривалий сеанс занять може призвести до погіршення самопочуття, виробник рекомендує послідовний підхід до збільшення обсягу навантаження.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-002
Тип:	пасивний / активний
Регулювання швидкості:	кнопкою на пульті
Витратомір калорій:	так
Тренування рук:	так
Швидкість обертів педалей, (об./хв.):	15 - 30 - 45 - 60
Таймер:	3 - 6 - 9 - 12 - 15 хвилин з автоматичним відключенням
Підрахунок:	кількості обертів
Напрямок обертів:	регулюється
Розміри тренажера, Д x Ш x В, (см):	48.5 x 32 x 29
Вага нетто, (кг):	5.6
Живлення, (В/Гц):	230/50
Споживана потужність, (Вт):	50
Гарантійний термін, (міс.):	12

4. Умови використання



Перевіряйте справність тренажера перед кожним використанням, якщо пристрій використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. На разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Тренажер слід використовувати у критому, провітрюваному й добре освітленому приміщенні за температури від 5 ° С до 32 ° С та відносній вологості від 20 % до 90 %. Розміщувати тренажер слід на рівну й нековзку поверхню.



Якщо не використовуєте пристрій – ЗАВЖДИ виймайте вилку з розетки!


5. Збирання виробу

1. Поставте пристрій на рівну та нековзку поверхню.
2. Прикрутіть гвинт на ліву педаль (від рукоятки зліва), повернувши ключ (у комплекті) проти годинникової стрілки.
3. З протилежного боку, прикрутіть гвинт на праву педаль повертаючи ключ за годинниковою стрілкою.
4. У якості альтернативи можна використовувати ручки А , що йдуть у комплекті.
5. Підключіть пристрій.

6. Використання пристрою

1. Підключіть шнур живлення до джерела живлення.
2. Підготуйте місце для занять.
3. Увімкніть тренажер.
4. Зніміть пульт (див. Рис. 2) дистанційного керування, який кріпиться на магніт, оберіть швидкість обертання педалей та тривалість тренування.
5. Після використання завжди відключайте тренажер від мережі!

7. Вправи

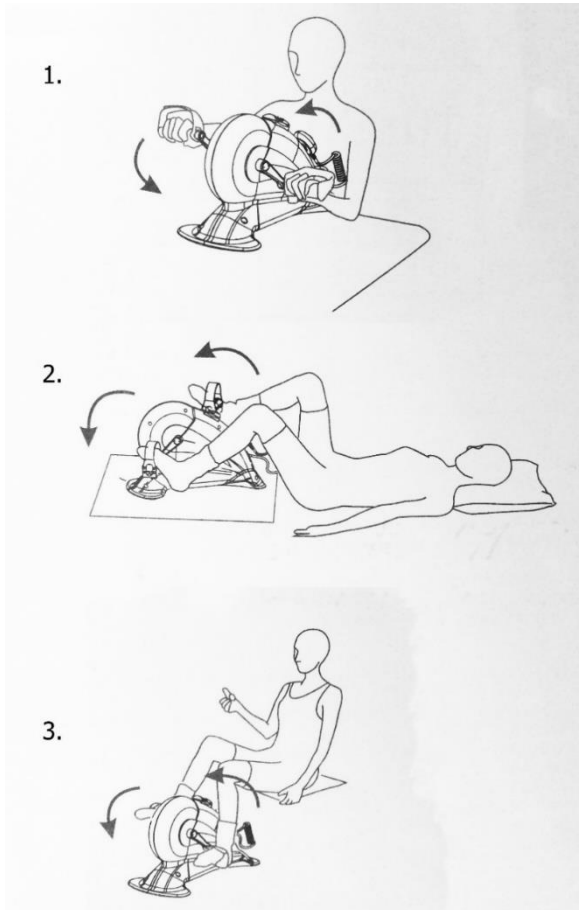

1. – Вправи для рук та плечей.
2. – Вправи, що виконуються лежачи.
3. – Вправи для ніг.

Рис. 1

8. Технічне обслуговування та догляд

Зовнішню поверхню тренажера обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте тренажер у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та м'яких засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

1. Не можна тягнути за шнур живлення та провід пульта керування.
2. Необхідно регулярно перевіряти тренажер протягом періоду експлуатації, не допускати послаблення різьбових з'єднань; при чищенні виробу не використовувати спирт, бензинові розчинники, не використовувати вологу тканину для чищення тренажера.
3. Зберігати в добре вентильованому приміщенні, не піддавати тренажер прямому впливу сонячного світла, щоб уникнути вицвітання або розтріскування пластмаси.

4. Тримати далеко від дітей.
5. Після експлуатації тренажер рекомендується протерти від вологи та пилу. Ніколи не занурюйте його у воду й не витирайте його мокрою ганчіркою. Необхідно користуватися лише сухою м'якою ганчіркою для очищення тренажера. Ніколи не чистіть тренажер хімічними засобами.
6. Необхідно берегти поверхню від ударів твердими чи гострими предметами.
7. Вимикайте тренажер із мережі, якщо ви не займаєтеся на ньому.


ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції тренажера, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати тренажер, щоб уникнути інфекцій.

- ¹ Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.
- ² Реабілітаційний тренажер «OSD-002» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для експлуатації.

9. Належна утилізація продукту

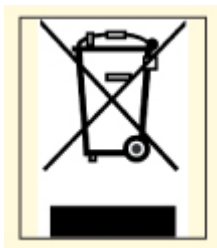

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

10. Відомості про сертифікацію

Реабілітаційний тренажер «OSD-002» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: DONGGUAN KOOEEJ TECHNOLOGY LIMITED NO.6, XINGHUA ROAD, SHIXIN INDUSTRIAL ZONE, ZHANGMUTOU TOWN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA / Дунгуань Куеєй Технолоджи Лімітед Ноб, Ксінгуа Роад, Шиксін Індустріал Зон, Чжанмутуо Таун, Дунгуань, Гуандун, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»;
адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр-т Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.

Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 30.06.2023.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на **реабілітаційний тренажер «OSD-002»** – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється. Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



11. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____