



Реабілітаційний тренажер для ніг та рук

OSD-CPS005ABC

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

## ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки .....	3
3.	Технічні характеристики.....	4
4.	Загальна характеристика.....	4
5.	Умови використання .....	5
6.	Збирання виробу.....	5
7.	Вправи .....	6
8.	Технічне обслуговування та догляд.....	6
9.	Належна утилізація продукту .....	7
10.	Відомості про сертифікацію .....	7
11.	Умови гарантії.....	8

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте реабілітаційний тренажер, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте реабілітаційний тренажер у випадку його пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Реабілітаційний тренажер для ніг та рук «OSD-CPS005ABC» (далі за паспортом – реабілітаційний тренажер / тренажер / пристрій / виріб) – призначений для використання людям з проблемами верхніх або нижніх кінцівок. Даний пристрій для механотерапії розрахований для використання як на вулиці, так і у житлових приміщеннях. Терапевтичний ефект досягається завдяки пасивній гімнастиці. Перед використанням пристрою необхідно проконсультуватися у лікаря.

Реабілітаційний тренажер для ніг та рук «OSD-CPS005ABC» розроблений для максимальної зручності та безпеки користувача.



**Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.**

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

## 2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування тренажера за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. Перед початком використання або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини пристрою закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.



**Реабілітаційний тренажер не можна використовувати стоячи на ньому! Це може призвести до перекидання та травмування користувача. Правильним є використання у положенні сидячи / лежачи!**

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан пристрою. Не

використовуйте тренажер у разі виявлення пошкоджень.

3. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд тренажера.
4. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню рідин на виріб.

### 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-CPS005ABC
Колір:	блакитний
Тип:	активний
Тренування рук / ніг:	так
Розміри, Д x Ш x В, (см):	46 x 39 x 28
Вага, (кг):	2,2
Гарантійний термін, (міс.):	12

### 4. Загальна характеристика

УВАГА



Зображення є орієнтовними. Тому, можуть відрізнятися від оригінального продукту.

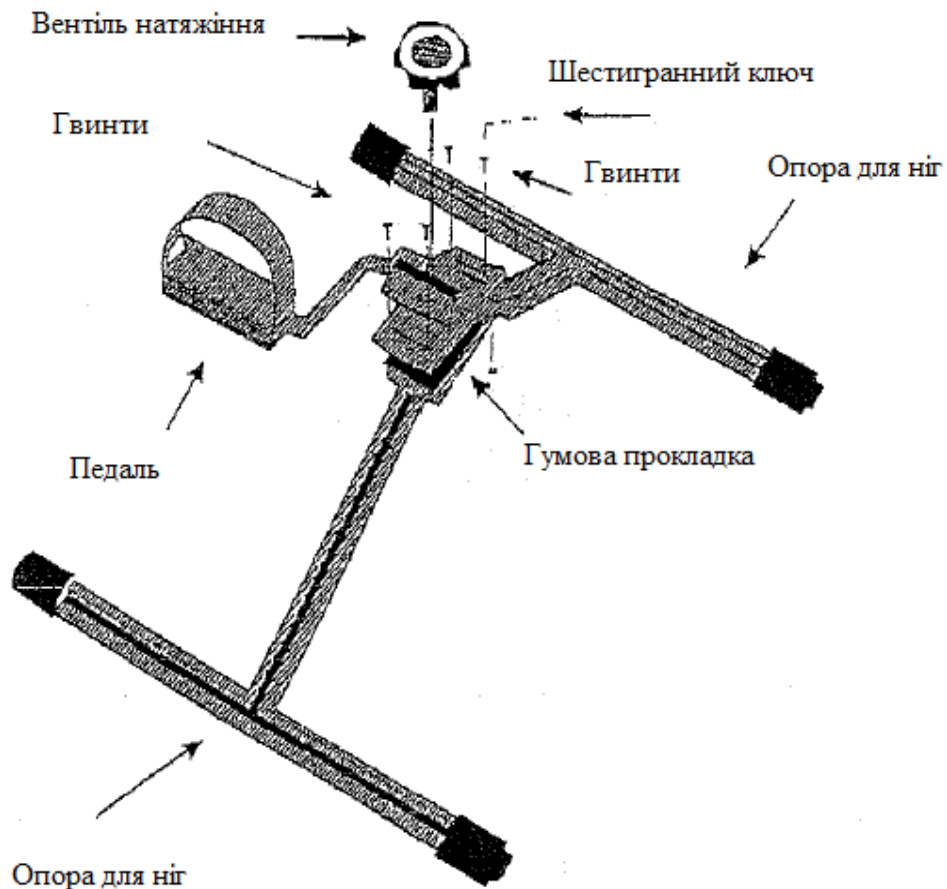


Рис. 1

[4]

Офіційна веб-сторінка: [osd.ua](http://osd.ua)

Пристрій виготовлений зі сталі та оснащений пластиковими педалями з ременями для підтримки ніг. Включає в себе ручку регулювання опору педалі відповідно до потреб користувача. Будь ласка, ретельно оцініть Ваш фізичний стан та Ваші потреби щоразу перед використанням продукту.

## 5. Умови використання



**Перевіряйте справність тренажера перед кожним використанням, якщо пристрій використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. На разі поломки або несправності, пошкодженень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.**

Тренажер слід використовувати у критому, провітрюваному й добре освітленому приміщенні за температури від 5 ° С до 32 ° С та відносній вологості від 20 % до 90 %. Розміщувати тренажер слід на рівну й нековзку поверхню.

## 6. Збирання виробу

Для остаточної підготовки тренажера до використання необхідно виконати наступні кроки:

1. Для того, щоб підготувати тренажер до експлуатації необхідно розкласти ніжні опори так, як показано на зображенні нижче (див. Рис. 2).
2. Для цього необхідно натиснути на кнопку (див. Рис. 3) до упору, а потім потягнути першу опору вниз. Далі виконайте ті ж самі дії з другою опорою.

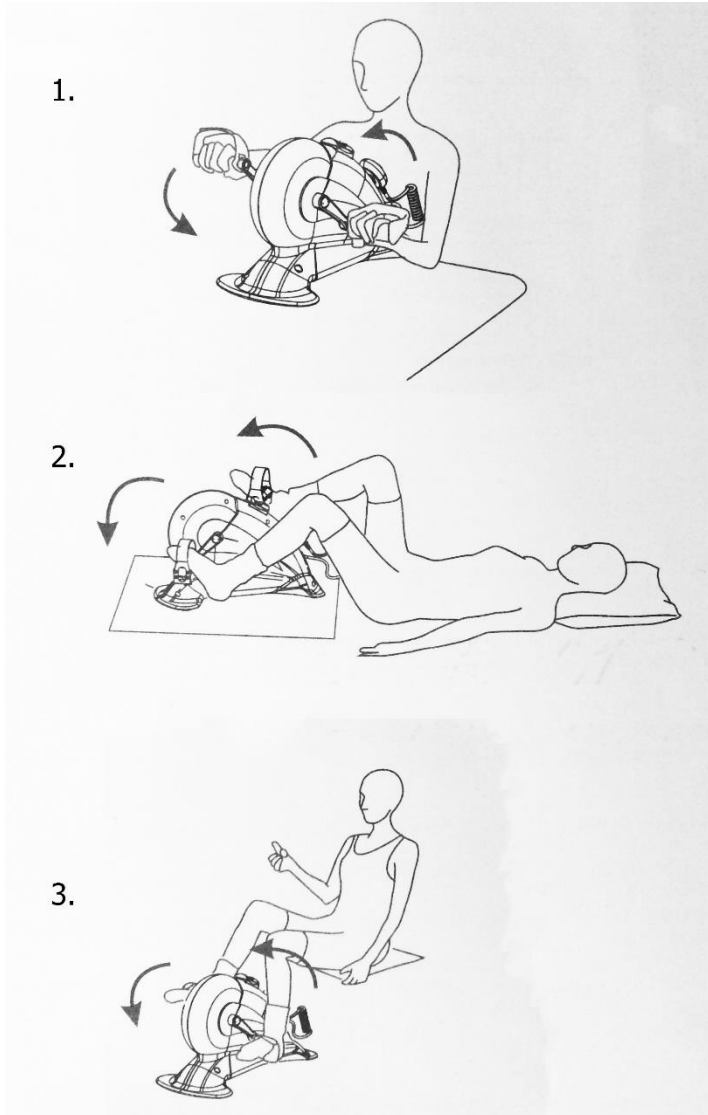


Рис. 2



Рис. 3

## 7. Вправи



1. – Вправи для рук та плечей.
2. – Вправи, що виконуються лежачи.
3. – Вправи для ніг.

Рис. 4

## 8. Технічне обслуговування та догляд

Зовнішню поверхню тренажера обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте тренажер у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції тренажера, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.




У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати тренажер, щоб уникнути інфекцій.

<sup>1</sup> Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

<sup>2</sup> Реабілітаційний тренажер «OSD-CPS005ABC» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для експлуатації.

## 9. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

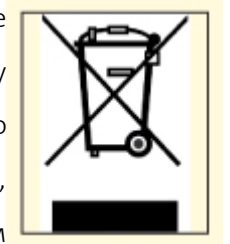

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

## 10. Відомості про сертифікацію

Реабілітаційний тренажер «OSD-CPS005ABC» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



**Виробник:** Combo (Zhongshan) Medical Equipment Co.,Ltd. /  
Комбо (Жонгшан) Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.

Building 1, № 6, East Tongxing Road, Dongshen Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China / Білдинг 1, № 6, Еаст Тонгксінг Роад, Донгшен Товн, Жонгшан Сіті, Гуандонг Провінсе, Китай.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 4 від 15.05.2019.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на **реабілітаційний тренажер «OSD-CPS005ABC»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється. Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.





## 11. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_