



**Тренажер для ніг та рук**

**OSD-102K**

**Інструкція з експлуатації**



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.  
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.

## ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки .....	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Умови використання .....	4
5. Збирання виробу.....	5
6. Використання пристрою.....	5
7. Вправи .....	6
8. Технічне обслуговування та догляд.....	7
9. Відомості про сертифікацію.....	7
10. Умови гарантії.....	8

## 1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**УВАГА**

**Не використовуйте тренажер, не ознайомившись з Інструкцією.**

**Не використовуйте тренажер у випадку його пошкодження.**

**Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Тренажер для ніг та рук «OSD-102K» (далі за паспортом – тренажер / виріб / обладнання) – розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.



**УВАГА**

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

## 2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування тренажера за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



**УВАГА**

**Тренажер не можна використовувати стоячи! Це може призвести до перекидання та травмування користувача. Правильним є використання у положенні сидячи / лежачи!**

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан пристрою. Не використовуйте тренажер у разі виявлення пошкоджень.
3. Кожні два роки слід **ПРОВІДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд тренажера.
4. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадання рідин на електричні частини тренажера.
5. **НЕ ЗАРЯДЖАЙТЕ** акумуляторну батарею у вологих приміщеннях.

## 3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-102K
Тип:	пасивний / активний

Регулювання швидкості:	кнопкою на пульті
Витратомір калорій:	так
Тренування рук:	так
Швидкість обертів педалей, (об./хв.):	15 - 30 - 45 - 60
Підрахунок:	кількості обертів
Напрямок обертів:	регулюється
Розміри тренажера, Д x Ш x В, (см):	49,8 x 30,8 x 36
Вага нетто, (кг):	5,5
Вага брутто, (кг):	6,5
Живлення, (В):	220 - 240
Споживана потужність, (Вт):	75
Частота, (Гц):	50
Гарантійний термін, (міс.):	12

#### 4. Умови використання



**Перевіряйте справність тренажера перед кожним використанням, якщо пристрій використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. На разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.**

Тренажер слід використовувати у критому, провітрюваному й добре освітленому приміщенні за температури від 5 ° С до 32 ° С та відносній вологості від 20 % до 90 %. Розміщувати тренажер слід на рівну й нековзку поверхню.



**Якщо не використовуєте пристрій – ЗАВЖДИ виймайте вилку з розетки!**

## 5. Збирання виробу

Для остаточної підготовки тренажера до використання необхідно виконати наступні кроки (див. рис. 1):

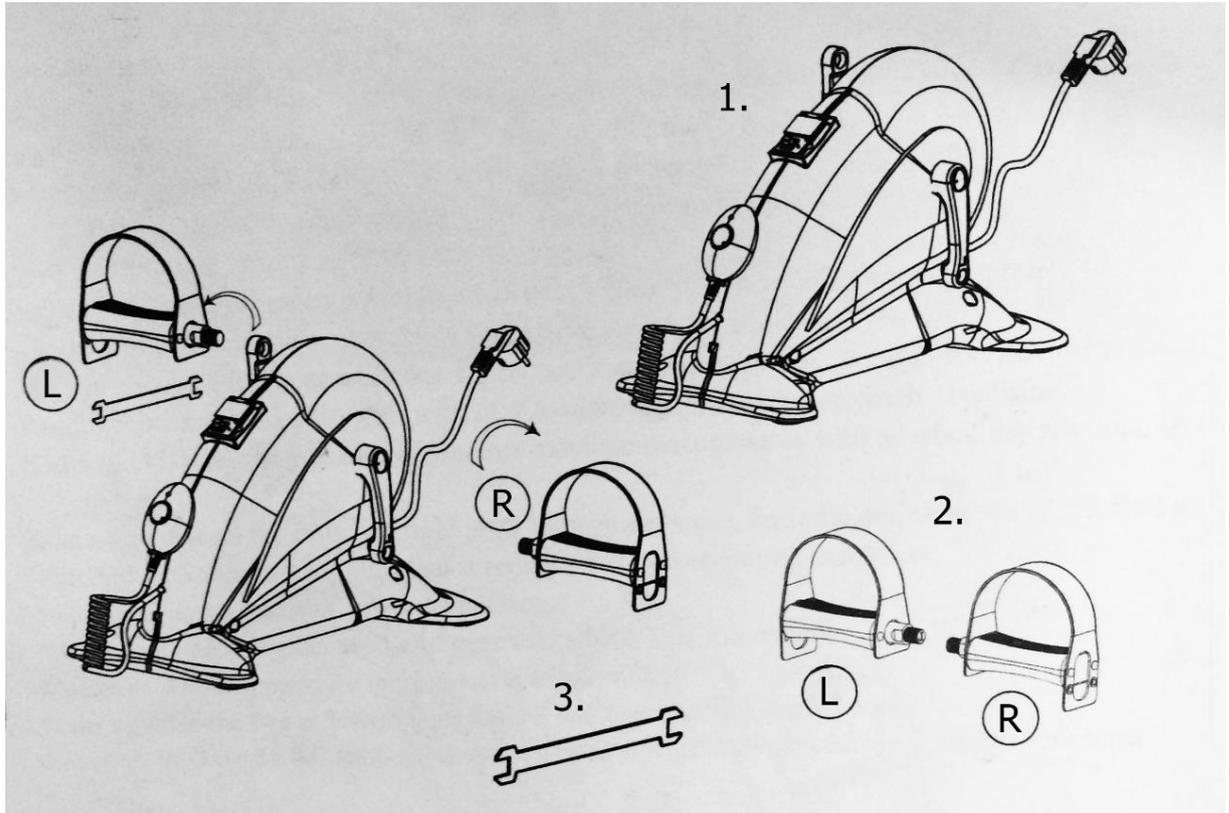


Рис. 1

1. Поставте пристрій на рівну та нековзку поверхню.
2. Прикрутіть гвинт на ліву педаль L (від рукоятки зліва), повернувши ключ (в комплекті) проти годинникової стрілки.
3. З протилежного боку, прикрутіть гвинт на праву педаль R, повертаючи ключ за годинниковою стрілкою.
4. Підключіть пристрій.

## 6. Використання пристрою

1. Підключіть шнур живлення до джерела живлення.
2. Підготуйте місце для занять.
3. Увімкніть тренажер.
4. Зніміть пульт (див. Рис. 2) дистанційного керування, який кріпиться на магніт, оберіть швидкість обертання педалей та тривалість тренування.


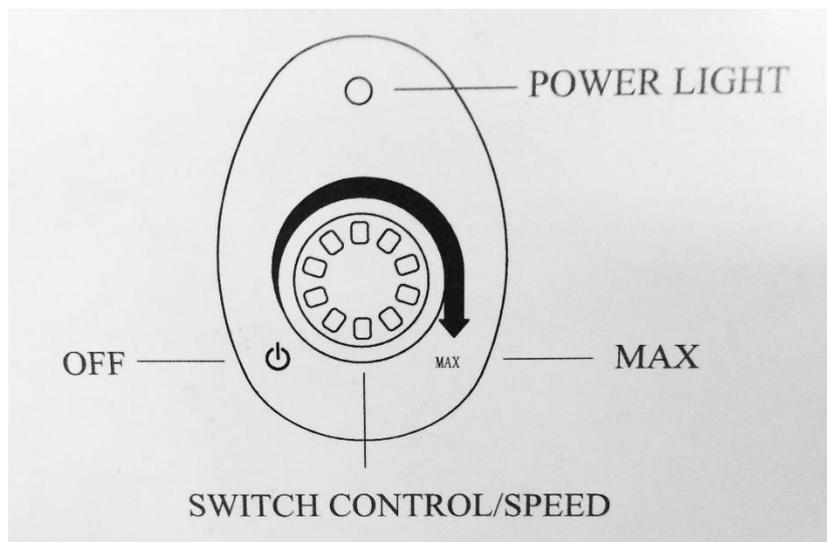


Рис. 2

5. Після використання завжди відключайте тренажер від мережі!

## 7. Вправи

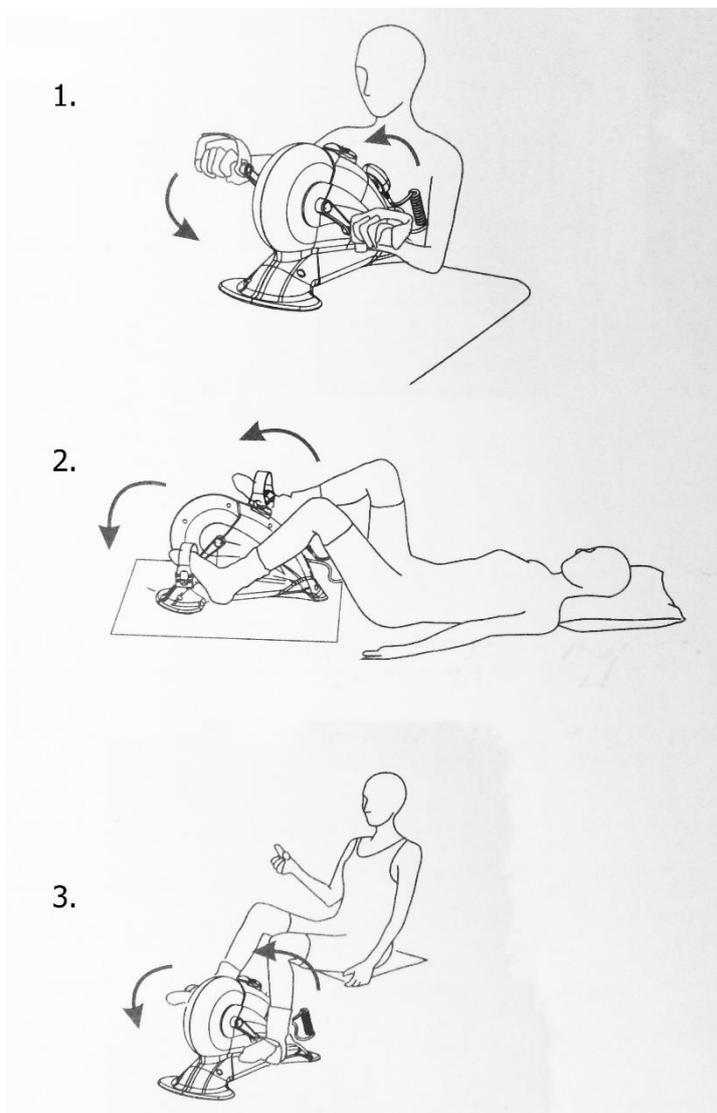

1. – Вправи для рук та плечей.
2. – Вправи, що виконуються лежачи.
3. – Вправи для ніг.

Рис. 3

[6]

Офіційна веб-сторінка: [osd.ua](http://osd.ua)

## 8. Технічне обслуговування та догляд

Зовнішню поверхню тренажера обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте тренажер у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції тренажера, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



**На разі використання виробу різними користувачами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати тренажер, щоб уникнути інфекцій.**

## 9. Відомості про сертифікацію

Тренажер для ніг та рук «OSD-102K» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.



**Виробник:** Foshan Nanhai Anjian Medical Equipment Parts Co., Ltd. / Фошан Нангаї Анджиан Медікал Еквіпмент Партс Ко., Лтд.

№.3 Xinji Industrial Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China / №.3 Ксінджи Індастріал Парк, Ксікуао Таун, Нангаї Дістрікт, Фошан Сіті, Гуандонг Провінсе, Китай

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

**Номер редакції:** № 3 від 27.11.2018.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

Гарантійний термін на **тренажер для ніг та рук «OSD-102K»** – 1 рік з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



## 10. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:  
*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.**

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_